

План дозировки для oro® дезинфицирующих средств



	В 5 Дезинфекция протиранием				В 5 Дезинфекция протиранием в случае эпидемии согласно RKI	
	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	2 %	7 %
Время экспоз. ⇨ (VAH/ DGHM)	60 мин.	30 мин. (Ного вирус: 60 мин)	15 мин..	30 мин. спорид 60 мин. вируцид.	4 час. вирусы	4 час. область экспозиции А и В
Готовый препарат ⇩	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат
1 литр	5	10	15	20	20	70
2 литра	10	20	30	40	40	140
3 литра	15	30	45	60	60	210
4 литра	20	40	60	80	80	280
5 литров	25	50	75	100	100	350
6 литов	30	60	90	120	120	420
7 литров	35	70	105	140	140	490
8 литров	40	80	120	160	160	560
9 литров	45	90	135	180	180	630
10 литров	50	100	150	200	200	700



B 5
Дезинфекция протиранием
- в случае эпидемии и при
Clostridium difficile-



B 10
Дезинфекция протиранием
- короткое время экспозиции



B 15
Дезинфекция протиранием
- активен против всех вирусов-

	В 10 Дезинфекция протиранием	В 15 Дезинфекция протиранием			В 20 Дезинфекция протиранием		
	2 %	0,5 %	1 %	2 %	3 %	1 %	2 %
Время экспоз. ⇨ (VAH/ DGHM)	5 мин. (Ного вирусы: 15 мин.)	60 мин.	15 мин.	5 мин.(вкл. Ного вирусы) 15 мин. вируцид	2 мин..	15 мин.	5 мин.
Готовый препарат ⇩	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат
1 литр	20	5	10	20	30	10	20
2 литра	40	10	20	40	60	20	40
3 литра	60	15	30	60	90	30	60
4 литра	80	20	40	80	120	40	80
5 литров	100	25	50	100	150	50	100
6 литров	120	30	60	120	180	60	120
7 литров	140	35	70	140	210	70	140
8 литров	160	40	80	160	240	80	160
9 литров	180	45	90	180	270	90	180
10 литров	200	50	100	200	300	100	200



B 20
Дезинфекция протиранием
- универсален и экономичен-



B 25 Дезинфекция
поверхностей
- для пищевой
промышленности-

В 25 Дезинфекция поверхностей	
1 %	2 % (загрязненная зона)
30 мин.	30 мин.
мл. концентрат	мл. концентрат
10	20
20	40
30	60
40	80
50	100
60	120
70	140
80	160
90	180
100	200

А 20 Дезинфекция инструментов	
2 %	
Время экспозиции ⇨ (VAH/ DGHM)	15 мин.
Готовый препарат ⇩	мл. концентрат
1 литр	20
2 литра	40
3 литра	60
4 литра	80
5 литров	100
6 литров	120
7 литров	140
8 литров	160
9 литров	180
10 литров	200

D 10 Дезинфекция аспирационных систем	
2 %	
Время экспозиции ⇨ (VAH/ DGHM)	60 мин.
Готовый препарат ⇩	мл. концентрат
1 литр	20
2 литра	40
3 литра	60
4 литра	80
5 литров	100
6 литров	120
7 литров	140
8 литров	160
9 литров	180
10 литров	200



A 20 Дезинфекция
инструментов
- универсальный и быстро-
активный -



D 10 Дезинфекция
аспирационных систем
- также для ингаля-
ционных аппаратов



Совершенная системная защита

orochemie


orochemie GmbH + Co. KG • Max-Planck-Straße 27 • D-70806 Kornwestheim
Telefon +49 7154 1308-0 • Telefax +49 7154 1308-40
info@orochemie.de • www.orochemie.de • shop.orochemie.de

План дозировки для oro® дезинфицирующих средств – флакон-дозатор –

	В 5 Дезинфекция протиранием				В 5 Дезинфекция протиранием в случае эпидемии согласно RKI	
	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	2 %	7 %
Время экспоз. ⇨ (VAN/ DGHM)	60 мин.	30 мин. (Ного вирус: 60 мин)	15 мин.	30 мин. спорцид 60 мин. вируцид.	4 час. вирусы	4 час. область экспозиции А и В
Готовый препарат ↓	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат
1 литр				1	1	
2 литра		1		2	2	7
3 литра				3	3	
4 литра	1	2	3	4	4	14
5 литров				5	5	
6 литров		3		6	6	21
7 литров				7	7	
8 литров	2	4	6	8	8	28
9 литров				9	9	
10 литров		5		10	10	35



1 Налить концентрат во флакон-дозатор

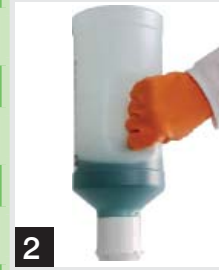

2 Закрытый флакон-дозатор 1x опрокинуть



3 20 мм концентрата находится в дозированной головке



4 Слить содержимое дозированной головки



5 Поставить флакон



6 При необходимости этапы 4-6 повторить.

	В 10 Дезинфекция протиранием	В 15 Дезинфекция протиранием			В 20 Дезинфекция протиранием		
	2 %	0,5 %	1 %	2 %	3 %	1 %	2 %
Время экспоз. ⇨ (VAN/ DGHM)	5 мин. (Ного вирусы: 15 мин.)	60 мин.	15 мин.	5 мин.(вкл. Ного вирусы) 15 мин. вируцид	2 мин.	15 мин.	5 мин.
Готовый препарат ↓	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат	мл. концентрат
1 литр	1			1			1
2 литра	2		1	2	3	1	2
3 литра	3			3			3
4 литра	4	1	2	4	6	2	4
5 литров	5			5			5
6 литров	6		3	6	9	3	6
7 литров	7			7			7
8 литров	8	2	4	8	12	4	8
9 литров	9			9			9
10 литров	10		5	10	15	5	10

В 25 Дезинфекция поверхностей	
1 %	2 % (загрязненная зона)
30 мин.	30 мин.
мл. концентрат	мл. концентрат
	1
1	2
	3
2	4
	5
3	6
	7
4	8
	9
5	10

А 20 Дезинфекция инструментов	
	2 %
Время экспозиции ⇨ (VAN/ DGHM)	15 мин.
Готовый препарат ↓	мл. концентрат
1 литр	1
2 литра	2
3 литра	3
4 литра	4
5 литров	5
6 литров	6
7 литров	7
8 литров	8
9 литров	9
10 литров	10

D 10 Дезинфекция аспирационных систем	
	2 %
Время экспозиции ⇨ (VAN/ DGHM)	60 мин.
Готовый препарат ↓	мл. концентрат
1 литр	1
2 литра	2
3 литра	3
4 литра	4
5 литров	5
6 литров	6
7 литров	7
8 литров	8
9 литров	9
10 литров	10



Совершенная системная защита

orochemie

orochemie GmbH + Co. KG • Max-Planck-Straße 27 • D-70806 Kornwestheim
Telefon +49 7154 1308-0 • Telefax +49 7154 1308-40
info@orochemie.de • www.orochemie.de • shop.orochemie.de